




# FastPrep-96™ Pro

## Quick Reference Guide

Revision 2024-11

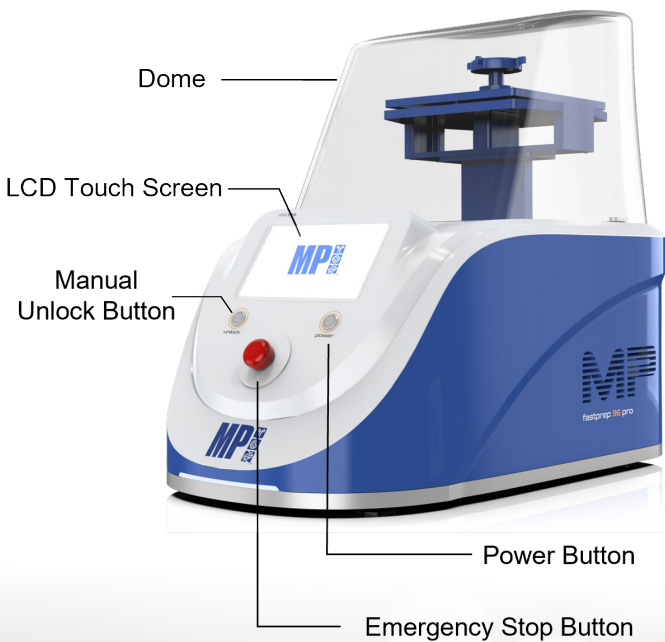



### Packing List


Items	SKU	Qty
FastPrep-96™ Pro	116014500	1
Metal QuickFlex™ Adapter	116010575	1
96 x 2 mL tubes		
Blue Clickmaster, Ratchet Nut	116004525	1
Power Cord with Universal Plug	-	1


## Installation & Setup


- Press the unlock button to open the dome manually.


- Remove the foam below the adapter plate.



- Connect the power plug.


- Turn on the power switch located at the back of the machine.


- Power on the machine by pressing the power button located on the front panel.



## Basic Operation

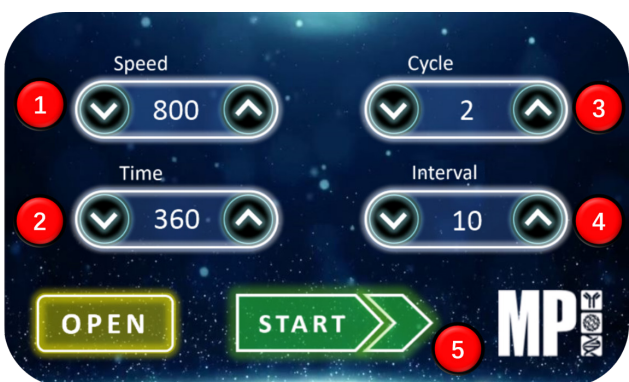

- Press or hold to adjust the speed.
- Press or hold to set the run time in seconds.
- Press to change the number of cycles.
- Press to adjust the duration of the pause between cycles, in seconds.
- Press to start the operation.




REGISTER YOUR INSTRUMENT to activate your warranty

Scan the code or visit [www.mpbio.com/registermyfastprep](http://www.mpbio.com/registermyfastprep)

## | Displays


### Main Screen:

The machine's operational parameters can be configured before starting.

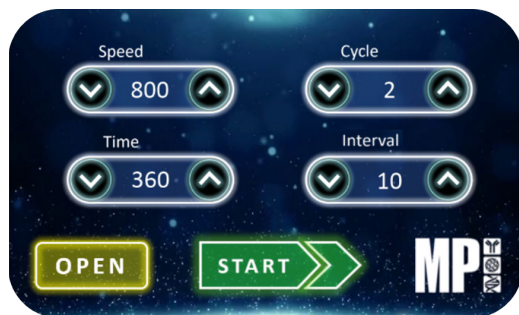


### Running Screen:

The elapsed time is displayed, and the operation can be aborted by pressing the 'STOP' button.

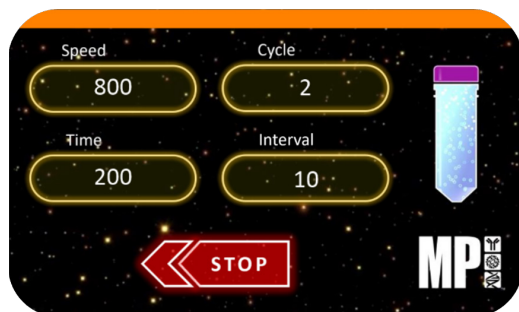

### Cycle Screen:

The interval time is displayed, the operation can be aborted by pressing the 'STOP' button.

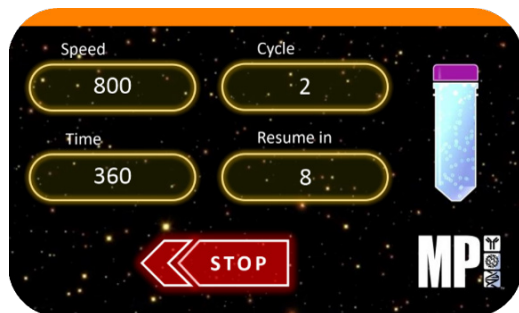

## | Safety Features

### Emergency Stop Screen:

This warning screen displays when the Emergency Button is pressed. Twist the knob to reset the machine.



### Dome Opened:

This warning screen displays if the dome is not securely closed before operation.



### For More Information:



Scan this QR code for the instruction manual and video.

## | Accessories List



Metal QuickFlex™ Adapter for 96 x 2 mL tubes for FastPrep-96™ Pro  
(SKU: 116010575)



Metal Dual Plate Holder Assembly for FastPrep-96™ Pro  
(SKU: 119696169)



Blue Clickmaster, Ratchet Nut for FastPrep-96™ Pro  
(SKU: 116004525)

## | Helpful Tips



Wipe the instrument with a damp, soft cloth, and a non-corrosive cleaning agent.



Turn off power when not in use.



Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

С.-Петербург  
spb@dia-m.ru

Новосибирск  
nsk@dia-m.ru

Воронеж  
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола  
nba@dia-m.ru

Красноярск  
krsk@dia-m.ru

Казань  
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону  
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург  
ekb@dia-m.ru

Кемерово  
kemerovo@dia-m.ru

Нижний Новгород  
nnovgorod@dia-m.ru



мобильное приложение

www.dia-m.ru