

Настольные сублимационные сушилки Sublimate, Esco

ДИАМ
инженерная лаборатория

Sublimate 2/5

Три очень компактных модели на 2 и 5 л на -55 и -90 °С со склада в Москве



- Температура конденсора — -55 °С (для удаления водных растворов) и -90 °С (для органических растворителей).
- Сушка препаратов в колбах, флаконах с укупоркой или без, на полках или на полках с подогревом.
- Сенсорный контроллер обеспечивает простое программирование сушки, разморозки, давления, температуры и файлов регистрации данных в реальном времени.
- Полная промывка и очищение ото льда поверхности конденсора функцией **LusterClear**.
- Быстрое и простое удаление основного льда в конце цикла системой активной разморозки **IceOut**.
- Датчики давления гарантируют надежное считывание, дискретность — 0,001 мбар.
- Безопасное включение вакуумной системы с помощью ручного вакуумного клапана.
- Безфреоновое охлаждение.
- Низкий уровень шума.

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 747-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru


Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Модель	FDL-2S8	FDL-5S8	FDL-5L8
Максимальная емкость, кг льда	2	5	5
Производительность по воде, л/сутки	3,5	7	7
Температура конденсатора, °С	-55	-55	-90
Измеряемое давление, мбар	0,001–100		
Измеряемая температура, °С	-60–100		-100–100
Материал камеры	Полированная сталь марки AISI 304		
Дисплей	Сенсорный, 5,7"		
Мощность, Вт	330		630
Габариты, мм	400 x 500 x 395	400 x 500 x 475	675 x 465 x 590
Вес нетто/брутто, кг	36/41	40/46	72/76

Аксессуары:

- камера акриловая,
- крышка акриловая с 8 портами,
- мини-полки для предварительного замораживания,
- полки четырехуровневые,
- подставки на колесах,
- системы для укупоривания,
- системы для подогрева с двумя полками,
- манифолды,
- адаптеры для колб диаметром 34/35, 29/32, 24/29 мм.

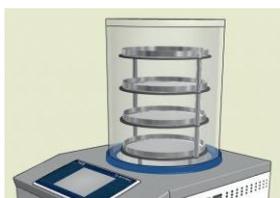

Сушилки необходимо комплектовать акриловой камерой, крышкой с 8 портами и вакуумным насосом; в комплект поставки не входят, заказываются отдельно. Вы можете использовать насос, имеющийся в лаборатории, или заказать у нас **рекомендуемый насос RV5, Edwards** со скоростью откачки 5,8 м³/час и предельным вакуумом 0,002 мбар.

Информация для заказа:

# 1370001	Лиофильная сушилка, 2 кг, настольная, -55 °С, SubliMate FDL-2S8, Esco	7 093= евро
# 1370002	Лиофильная сушилка, 5 кг, настольная, до -55 °С, SubliMate FDL-5S8, Esco	10 241= евро
# 1370003	Лиофильная сушилка, 5 кг, настольная, до -90 °С, SubliMate FDL-5L8, Esco	11 987= евро

лабораторное оборудование ■ пластик ■ стекло ■ реактивы ■ наборы

www.dia-m.ru
заказ онлайн