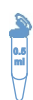


РОТАМИКС RM - 1

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
РЕЖИМОВ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯРЕЖИМ УЛЬТРА-
ЭФФЕКТИВНОГО
ВОРТЕКСА3 BONUS
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
РЕЖИМАFLASH
MEMORY

ЛЮБЫЕ

Rotamix RM-1 может использоваться
для перемешивания любых типов
пробирок объемом от 0.5мл. до 50мл.

3 Размера

SMALL
315mmMEDIUM
340mmLARGE
420mm

Аксессуары



RM-1 -Это прибор не имеющий аналогов по возможностям перемешивания жидкостей в пробирках, вакутайнерах и т.д. объемом от 0.5 до 50 мл. Очень эффективен для перемешивания образцов крови в микротайнерах или пробирках типа erpendorf.

СВОЙСТВА:

- Задание и отображение на световых индикаторах режима и скорости перемешивания.
- 18 эффективных программ перемешивания.
- Режим вортекса с настраиваемой частотой и амплитудой встряхивания.
- 3 дополнительные программы составляемые пользователем.
- Переход в режим SLEEP при остановке более чем на 5 минут.
- Сохранение в энергонезависимой памяти заданных параметров после выключения прибора из сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения:	об/мин	переменная, от 1 до 99
Дискретность установки:	об/мин	1
Температура окружающей среды:	°C	от +2 до + 50
Относительная влажность воздуха (при температуре 20 °C)	%	не более чем 80
Напряжение на выходе адаптера	⊖—⊕	DC in 12V, 1000 mA
Потребляемая мощность (при максимальной скорости):	Вт	не более чем 12
Вес:	кг	1,6

