

VIP ECO

Натуральные хладагенты в вертикальном морозильнике -86 °С.

845 л



MDF-DU901VHL-PE



Экономичное и экологически чистое хранение образцов на оптимальной занимаемой площади

Вертикальный морозильник MDF-DU901VHL-PE VIP ECO -86 °С обеспечивает максимальную емкость для хранения образцов при оптимальной занимаемой площади в сочетании с естественными хладагентами, что позволяет минимизировать потребление энергии, снизить воздействие на окружающую среду и сэкономить деньги.

Хранение максимального числа образцов


Использование компактных запатентованных панелей VIP PLUS в морозильном шкафу позволяет вместить до 672 2-дюймовых коробок на площади всего 1 м² для хранения максимального числа образцов. Стандартная глубина морозильной камеры упрощает установку.



Большая емкость для хранения образцов
Идеально подходит для хранения больших объемов и длительного хранения проб в биобанках и биохранилищах.

Эффективное охлаждение

Природные углеводородные (HC) хладагенты обеспечивают более эффективное охлаждение благодаря высокой скрытой теплоте испарения. Помимо повышения производительности, это приводит к снижению энергопотребления и затрат на электроэнергию.

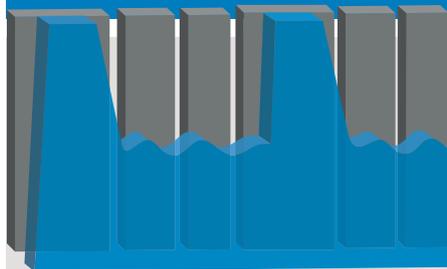

Однородное хранение образцов
Инверторные компрессоры обеспечивают оптимальную стабильность, а качество конструкции гарантирует надежность. Идеально подходит для образцов, чувствительных к колебаниям температуры.

Интеллектуальный интерфейс

EZlatch делает доступ к сохраняемым образцам еще проще. Сенсорная панель с цветным ЖК-дисплеем обеспечивает полный контроль пользователя даже руками в перчатках, а порт USB делает передачу зарегистрированных данных на ПК простой и удобной.



Простой мониторинг данных
Важная информация, такая как температура морозильной камеры, время открытия дверцы и история аварийных сигналов, регистрируется для мониторинга в приложениях GLP.

