

CO₂ инкубаторы

с Регистрационным удостоверением
Росздравнадзора (РУ)*


ДИА-М
сервисная лаборатория



Каждый CO₂-инкубатор **Binder** гарантирует создание оптимальных, воспроизводимых условий роста клеточных культур. Новая система нагрева на основе силиконовой оболочки вместе с технологией **Permadyr** обеспечивает отсутствие конденсата. Благодаря функции стерилизации горячим воздухом при температуре 180 °C бактерии и споры при необходимости надежно уничтожаются. Уникальная бесшовная внутренняя камера без креплений существенно упрощает очистку. Значительные преимущества для стабильно успешного культивирования клеток и тканей в CO₂-инкубаторах серии **CB** и **C**.



Преимущества CO₂-инкубаторов серии CB и C, Binder


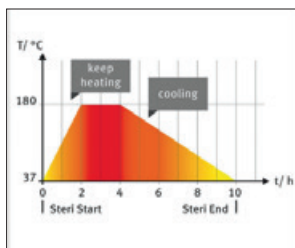


Минимальный риск контаминации

Благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 °C, полная стерилизация всего внутреннего пространства камеры по нажатию кнопки. Датчик CO₂ тоже стерилизуется во время этого процесса.

Наилучший рост клеток

благодаря стабильному значению pH, получаемому с помощью бездрейфовой системы измерения CO₂ и равномерному распределению CO₂ с помощью газосмесительной головки **Binder**, работающей на основе эффекта Вентури.

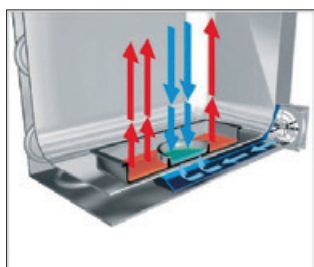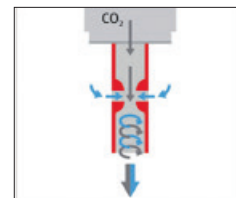

Уникальная технология управления влажностью

благодаря высоким значениям влажности от 90 до 95% отн. вл. среда практически не испаряется. Активная система увлажнения **Permadyr** двухзонным поддоном обеспечивает сухие внутренние стены.

* Регистрационное удостоверение Росздравнадзора позволяет использовать оборудование в медицинских учреждениях.




Концепция внутреннего пространства «меньше значит больше»

обеспечивает быструю и простую очистку благодаря внутренней камере из нержавеющей стали без выступающих креплений. Расходные материалы не требуются.

Мультигазовые CO₂-инкубаторы


возможность чередования гипоксичных и гипероксичных условий инкубирования путем регулирования подачи CO₂, N₂ и O₂.

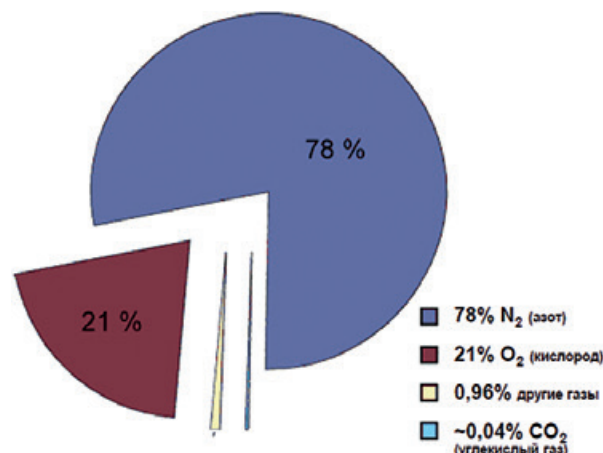

Опции: увеличение диапазона регулирования O₂ до 10-95%, установка 4 секционной дверцы, установка 6 и 8 секционных дверец с 1 секцией для быстрого доступа, установка шейкера в камеру, подставки и переходники для установки инкубаторов друг на друга (штабелирования), а также тележки с роликами для удобного и быстрого перемещения, установка портов для дополнительных датчиков и многое другое.

Информация для заказа:

9040-0187	CO ₂ -инкубатор СВ 53, 53 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C	РУ	692 899,=
9640-0006-RU	CO ₂ -инкубатор СВ 53, 53 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C, регулятор O ₂	РУ	859 045,=
9640-0001-RU	CO ₂ -инкубатор С 150, 170 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик, стерилизация при 180°C	РУ	548 481,=
9640-0009-RU	CO ₂ -инкубатор СВ 150, 170 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C	РУ	856 967,=
9640-0010-RU	CO ₂ -инкубатор СВ 150, 170 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C, регулятор O ₂	РУ	941 718,=
9640-0018	CO ₂ -инкубатор СВ 150, 170 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C, регулятор O ₂ , активное увлажнение	РУ	1 425 341,=
9640-0003-RU	CO ₂ -инкубатор С 210, 267 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик, стерилизация 180°C, регулятор O ₂	РУ	741 528,=
9640-0013-RU	CO ₂ -инкубатор СВ 210, 267 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C	РУ	1 192 103,=
9640-0014-RU	CO ₂ -инкубатор СВ 210, 267 л, силиконовая рубашка, ИК-датчик стерилизуемый, стерилизация при 180°C, регулятор O ₂	РУ	1 383 646,=

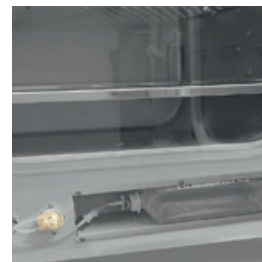

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemeroovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

